

种植手术工具盒 标准工具盒(PKFA, 42 个)

简单、高效的工具盒系统 — LeadOss始终致力于将种植变的更加简便易行。



▼ 底层面板



▼ LeadOss临床辅助工具盒 (了解更多工具盒扫描下方二维码)



LeadOss 始终致力于将种植变得更加简便易行。

因此，我们研发全套的种植系统、修复系统，设计开发了通用的手术工具盒
满足更广泛的临床需求，并可根据临床需求个性化定制。

利多齿 种植体系统

LeadOss Implant System

杭州民生立德医疗科技有限公司
HANGZHOU MINSHENG LIDE MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY Co., Ltd.



LeadOss和LeadOss® Pro 设计特征

颈部微倒锥形设计

确保合适的固位力，使骨不受到多余的应力，拥有柔和的植入感，防止骨吸收和种植体周围炎

双螺纹结构

有利于缩短植入时间，使植入更顺畅

可变直体区

可提供多种高度的种植体选择(7/8.5/10/11.5/13/15mm)

底部锥形设计、圆底设计

无应力且具自攻性
让手术植入更安全

利多齿ExC⁺imer Light表面


达到纳米级生物活性界面层
表面接触角优化，细胞级骨整合加速

逐级变化的方形螺纹设计

有利于手术植入，减少皮质骨压力，预防骨吸收

锋利的螺纹和切割刃


优秀的切削力和固位力

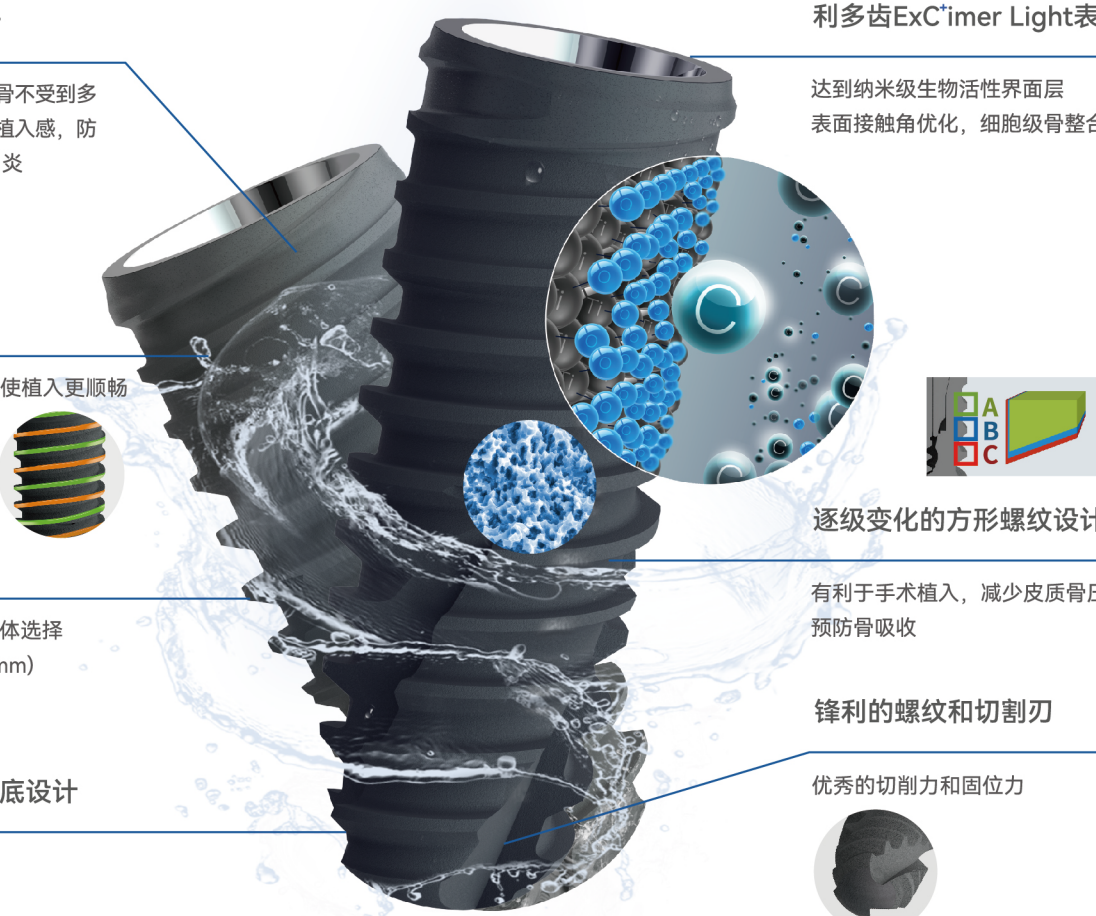

专利设计：倒锥形+直体区+锥形,有利于保护软组织和预防骨吸收的轮廓设计


利多齿ExC⁺imer Light表面性能的研究

ExC⁺imer Light表面的亲水结构

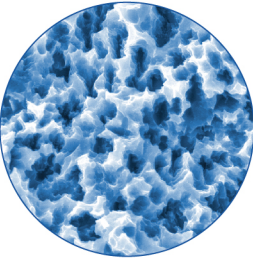


细胞级骨整合加速
成骨细胞贴附效率提升

ExC⁺imer 光照射增加洁净度

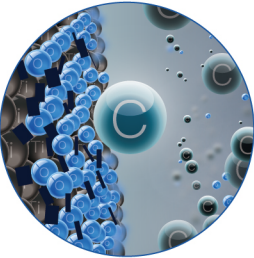

种植体表面的洁净度提升，术后感染率降低，抗菌性能升级

ExC⁺imer Light亲水结构加速早期骨整合

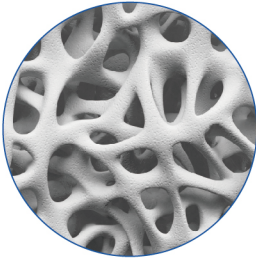

研究表明，利多齿亲水结构可以促进纤维蛋白网络的形成和骨矿化沉积周期缩短

骨结合时间缩短3-4周

骨水平种植体规格

N	长度	7.0	8.5	10	11.5	13	15
直径	Ø 3.6	BN3607(N)	BN3608(N)	BN3610(N)	BN3611(N)	BN3613(N)	BN3615(N)
	Ø 4.2	BR4207(N)	BR4208(N)	BR4210(N)	BR4211(N)	BR4213(N)	BR4215(N)
直径	Ø 4.8	BR4807(N)	BR4808(N)	BR4810(N)	BR4811(N)	BR4813(N)	BR4815(N)
	Ø 5.4	BR5407(N)	BR5408(N)	BR5410(N)	BR5411(N)	BR5413(N)	
直径	Ø 6.0	BR6007	BR6008	BR6010	BR6011	BR6013	

备注:Ø 3.6/Ø 4.2推荐用于前牙区,为预防牙龈萎缩影响美观,这2类直径的种植体没有光滑颈圈
*骨水平型号加 N 的为亲水种植体

软组织水平种植体规格

R	长度	7.0	8.5	10	11.5	13
直径	Ø 3.6	TRS3607	TRS3608	TRS3610	TRS3611	TRS3613
	Ø 4.2	TRL4207	TRL4208	TRL4210	TRL4211	TRL4213
直径	Ø 4.8	TR4807	TR4808	TR4810	TR4811	TR4813
	Ø 5.4	TWS5407	TWS5408	TWS5410	TWS5411	TWS5413

备注:如需Ø 6.0规格，请联系当地销售或经销商

LeadOss® Pro无牙颌/骨质差/特殊病症患者的福音

亲水种植

[全口半口]




· 种植新生态

[即刻修复]



· 重拾咀嚼

[即拔即种]

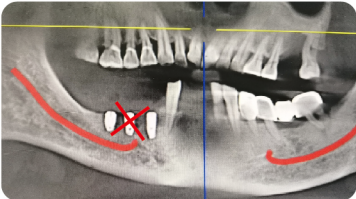

· 降低风险，种植更安心

[大量植骨]



· 全方位提升种植成功率

[特殊病症]



· 更适用于骨质疏松、糖尿病